

# Smart Dryer Li-ion



## Ladesystem

- Smart Li-Ionen Power Integration.
- Gleichzeitiges Aufladen und Pflegen von Hörgeräten.



## Entfeuchtungs-system

- Patentierte Technik.
- Die durch den Mikroprozessor gesteuerte Temperatur garantiert eine Temperatur unter 30°C/86°F.
- Optimierte und homogene Luftströmung.
- Effektiver Feuchtigkeitsentzug.



## UV-C-system

- Alle mit der Haut in Berührung tretenden Oberflächen werden behandelt.
- Keine Beschädigungsgefahr des Schutzlackes und der Oberflächenbehandlung.
- Automatischer Stopp bei Erkennung einer Öffnung der Abdeckung.
- Das System wird durch den eingebauten Mikroprozessor gesteuert.



# Smart Dryer Li-ion

## System zur gleichzeitigen Pflege und Aufladen von Lithium-Ionen-Hörgeräten



# Einfaches Entfeuchten, Behandeln und Aufladen von Lithium-Ionen-Hörgeräten

## Smart Dryer Li-ion

Der **Smart Dryer Li-ion** ist ein medizinisches Gerät, das speziell entwickelt wurde, um das Aufladen von Lithium-Ionen-Hörgeräten mit wichtigen Pflegemaßnahmen, insbesondere der Entfeuchtung und UV-C-Behandlung, zu kombinieren. Seine Spitzentechnologie, seine Benutzerfreundlichkeit und sein einzigartiges Design machen es zu einem außergewöhnlichen Produkt.

Die Leistungen des **Smart Dryer Li-ion** sind eine zuverlässige Lösung, um feuchtigkeitsbedingte Ausfälle zu beseitigen und so die Leistung und Lebensdauer von Hörgeräten zu optimieren.

So können Sie Tag für Tag das Beste aus Ihren Hörgeräten machen.

## Wie funktioniert der Smart Dryer Li-ion?

Der **Smart Dryer Li-ion** ist eine vollautomatische Multifunktionslösung, die Auflade- und Pflegefunktionen kombiniert.

Dieses System zeigt ein echtes Bestreben, die routinemäßige Pflege von Hörgeräten zu erleichtern.

Einfach die Hörgeräte in die vorgesehene Ladekammer legen und die Abdeckung schließen, um den Lade- und Pflegezyklus zu starten, der nach erfolgreichem Zyklus automatisch stoppt.

Die **Smart Dryer Li-ion** Technologie macht es zu einem benutzerfreundlichen und eigenständigen Produkt, das leicht zu Teil Ihrer täglichen Routine wird, unabhängig von Ihrem Lebensstil.

Die Smart Li-Ion Aufladestation ist einfach in das Gerät einzulegen.



## Setzen Sie die Hörgeräte ein

Kompatibel mit allen wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Hörgeräten folgender Marken:

Audio Service - Rexton - Signia

## Automatischer Start

### Multifunktionales Produkt

#### Pflegesystem

Entfeuchtung: Feuchtigkeitsentzug / UV-C: Behandlung der exponierten Hörgerät-Oberflächen.

#### Ladesystem


Lädt Lithium-Ionen-Batterie Hörgeräte der Sivantos-Gruppe.



Ladevorgang



Kontrollierte Entfeuchtungstechnologie

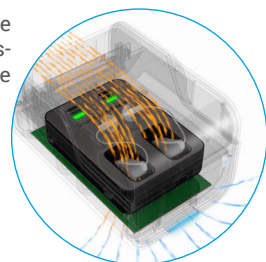

UV-C

